



Wall Fastening M2 w/o power

Instrucciones de uso

P/N: 1042100100



CE

Fecha de publicación: 13.05.2025

Rev. A.es

Índice

Introducción Instrucciones de seguridad	4
Uso previsto	4
Volumen de suministro	5
Especificaciones técnicas	5
Accesorios	5
Montaje Instalación	6
Manejo	7
Limpieza Desinfección	8
Símbolos empleados	8
Eliminación	9
Servicio Fabricante	9

Introducción | Instrucciones de seguridad

Introducción

Estimado cliente:

Gracias por comprar el Wall Fastening M2 w/o power.

En este manual encontrará información técnica, así como instrucciones de uso y de montaje.

Instrucciones de seguridad

- Lea detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el Wall Fastening M2 w/o power.
- Guarde cuidadosamente estas instrucciones para futuras consultas y observe con especial atención las instrucciones de seguridad.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados debido a un funcionamiento, aplicación, limpieza, modificación o instalación inadecuados.
- Las reparaciones y el mantenimiento del Wall Fastening M2 w/o power sólo podrán ser realizados por personal especializado autorizado. En caso de defectos, póngase en contacto directamente con el servicio técnico de atención al cliente de CRS medical GmbH. Cualquier modificación en el dispositivo o sus accesorios no realizada por el fabricante anulará las obligaciones de garantía y responsabilidad de CRS medical GmbH.
- Si el vehículo terrestre de asistencia médica (EMS) se viera involucrado en un accidente (sin daños menores), se deberá reemplazar el soporte. Continuar utilizándolo conllevará la anulación de las obligaciones de garantía y responsabilidad de CRS medical GmbH.
- Compruebe el Wall Fastening M2 w/o power y no lo utilice si detecta daños mecánicos en el mecanismo de bloqueo.

Uso previsto

El soporte de pared Wall Fastening M2 w/o power solo está destinado para el montaje seguro de un ZOLL M2® junto con la bolsa de accesorios ZOLL M2® original. No está permitido el uso de ninguna otra funda protectora para este dispositivo.

El Wall Fastening M2 w/o power ha sido diseñado para el uso estacionario o para su uso en ambulancias. En la ambulancia, el desfibrilador utilizado queda sujeto de forma segura, permitiendo utilizarlo su uso durante la operación. El soporte solo se puede utilizar en entornos espacialmente protegidos. Aquí se incluyen paredes sólidas en el interior de edificios y paredes estables en los vehículos terrestres de asistencia sanitaria (EMS).

Consulte también las instrucciones de uso del desfibrilador.

Volumen de suministro

1 Wall Fastening M2 w/o power (P/N: 1042100100) (UDI-DI: 04251964600195)

1 Instrucciones de uso

Especificaciones técnicas

Descripción	Datos
Peso	3950 g
Dimensiones (AlxAxF)	362x277x231 mm
Temperatura de funcionamiento	0°C a +40°C, 5% a 95% HR, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-30°C a +70°C, 5% a 95% HR, sin condensación


Como parte de las mejoras del producto, nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y ópticos en el artículo.

Accesorios

No hay accesorios adicionales disponibles.

Montaje | Instalación

Asegúrese de que la superficie pueda soportar el peso del Wall Fastening M2 w/o power, incluido el desfibrilador con bolsa y accesorios. Fije el Wall Fastening M2 w/o power a una superficie plana utilizando 8 tornillos M6 de acuerdo con el patrón de perforación que se muestra a continuación. Asegúrese de tener suficiente libertad de movimiento para insertar y retirar el desfibrilador, bolsa incluida.

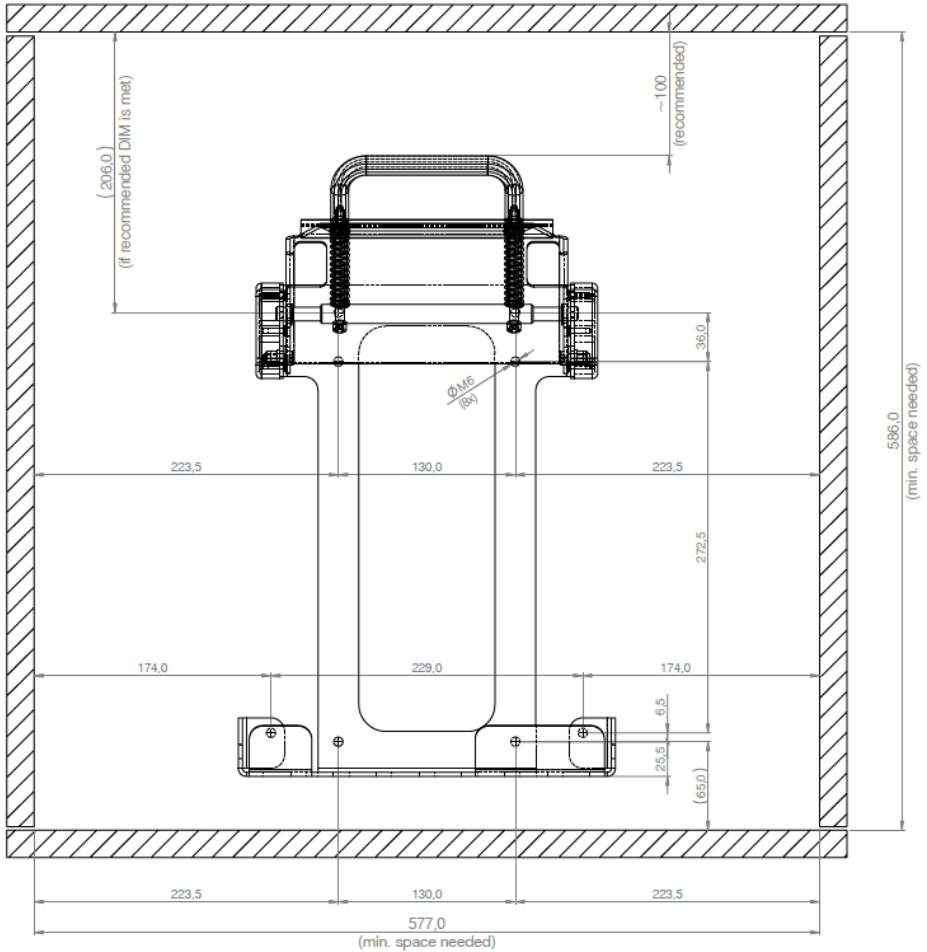

(Todas las medidas se proporcionan en mm)

Manejo

Apertura

Desbloquee el Wall Fastening M2 w/o power tirando hacia adelante de la empuñadura roja (1) y moviéndola a continuación hacia arriba (2). El bloqueo se queda encajado en la posición superior (3) y ya se puede retirar el dispositivo.



Cerrar

Asegúrese de que el ZOLL M2TM con la bolsa de accesorios correspondiente esté colocado correctamente en la carcasa inferior del Wall Fastening M2 w/o power.

No es necesario desbloquearlo para cerrar. Agarre la empuñadura roja y tire de la tapa hacia abajo. La forma más segura de bloquear el Wall Fastening M2 w/o power es soltando la tapa después de superar la resistencia y dejando que se deslice por sí sola hasta su posición final. Se puede escuchar un sonido de clic.

Limpieza | Desinfección

Retire el ZOLL M2™ del soporte para limpiarlo.

El Wall Fastening M2 w/o power se puede limpiar con un trapo húmedo que no deje pelusas y limpiadores de plástico suaves convencionales. Antes de usarlo, asegúrese de que el producto de limpieza no contenga disolventes.

Utilice también desinfectantes convencionales para desinfectar.

Símbolos empleados



Consulte las instrucciones de uso/Observe las instrucciones de seguridad



Marcado CE según el Reglamento de Productos Sanitarios 2017/745 (Medical Device Regulation)



Número de referencia



Observe las instrucciones de uso electrónicas



Número de lote de identificación única del producto



Número de lote



Fabricante



Dispositivo médico



El rango de temperatura recomendado para el almacenamiento



La humedad relativa recomendada para el almacenamiento



Manipule el paquete con cuidado

Eliminación

El embalaje es una materia prima y, por tanto, reciclable. En favor de la protección del medio ambiente, elimínelos de forma selectiva.

Para obtener más información sobre la eliminación respetuosa con el medio ambiente, póngase en contacto con el fabricante.

Servicio | Fabricante

CRS medical GmbH
Loherstraße 6
D - 35614 Asslar

T: +49 6441 38331-0
F: +49 6441 38331-29
info@crs-medical.com www.crs-medical.com



Loherstraße 6
D-35614 Aßlar

T: +49 6441 38331-0
F: +49 6441 38331-29

info@crs-medical.com
www.crs-medical.com