

Gebrauchsanweisung | User Manual

Bracket AED Pro

P/N: 1042100001 (vorherige P/N: 2100403029)

■ INHALTSVERZEICHNIS | TABLE OF CONTENTS

EINLEITUNG SICHERHEITSHINWEISE	1
VERWENDUNGSZWECK	2
LIEFERUMFANG	2
TECHNISCHE DATEN	3
ZUBEHÖR	3
MONTAGE	4
BEDIENUNG	5
REINIGUNG DESINFEKTION	6
VERWENDETE SYMBOLE	7
ENTSORGUNG	7
SERVICE HERSTELLER	7
WELCOME SAFETY INSTRUCTIONS	8
APPLICATION	9
SCOPE OF DELIVERY	9
TECHNICAL DATA	10
ACCESSORIES	10
INSTALLATION	11
OPERATION	12
CLEANING DISINFECTION	13
SYMBOLS	13
DISPOSAL	13
SERVICE MANUFACTURER	13

■ EINLEITUNG | SICHERHEITSHINWEISE

Lieber Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Bracket AED Pro.

In dieser Anweisung finden Sie technische Informationen, Gebrauchs- und Montagehinweise.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Bracket AED Pro in Betrieb nehmen.
- Bewahren Sie diese Anleitung für Nachschlagezwecke sorgfältig auf und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise.
- Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung oder Montage entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Instandsetzung und Wartung am Bracket AED Pro dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Bitte wenden Sie sich bei einem Defekt direkt an den technischen Kundendienst der CRS medical GmbH. Jegliche Veränderungen an der Vorrichtung oder ihrem Zubehör, die nicht vom Hersteller vorgenommen werden, führen zu einem Außerkrafttreten der Gewährleistungs- und Haftungsverpflichtungen der CRS medical GmbH.
- Überprüfen Sie das Bracket AED Pro und benutzen Sie es nicht wenn:
 - mechanische Beschädigungen am Schließmechanismus zu erkennen sind
 - mechanische Beschädigungen an der Geräteaufnahme zu erkennen sind

■ VERWENDUNGSZWECK

Das Bracket AED Pro ist für die sichere Halterung eines Defibrillator ZOLL AED Pro® in Verbindung mit der unter dem Punkt Zubehör aufgeführten Tasche bestimmt. Die Verwendung einer anderen Schutztasche für dieses Gerät ist nicht zugelassen.

Die Halterung darf nur in räumlich geschützten Umgebungen verwendet werden. Dazu gehören massive Wände im Innenraum von Gebäuden und stabile Wände von EMS-Bodenfahrzeugen.

Bitte beachten Sie zusätzlich die Gebrauchsanweisung des Defibrillators.

■ LIEFERUMFANG

1 Bracket AED Pro (P/N: 1042100001)

1 Gebrauchsanweisung

■ TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2300 g
Maße (HxBxT)	255x335x130 mm
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C, 5% bis 95% HR, nicht kondensierend
Lagertemperatur	-30°C bis +70°C, 5% bis 95% HR, nicht kondensierend

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

■ ZUBEHÖR

Das folgende Zubehör ist im Lieferumfang nicht enthalten.


Softbag AED Pro (P/N: 1042101009)



AED Pro® mit Softbag AED Pro

■ MONTAGE

Befestigen Sie das Bracket AED Pro mit 4 Schrauben M6 gemäß dem nachfolgenden Bohr-
bild.

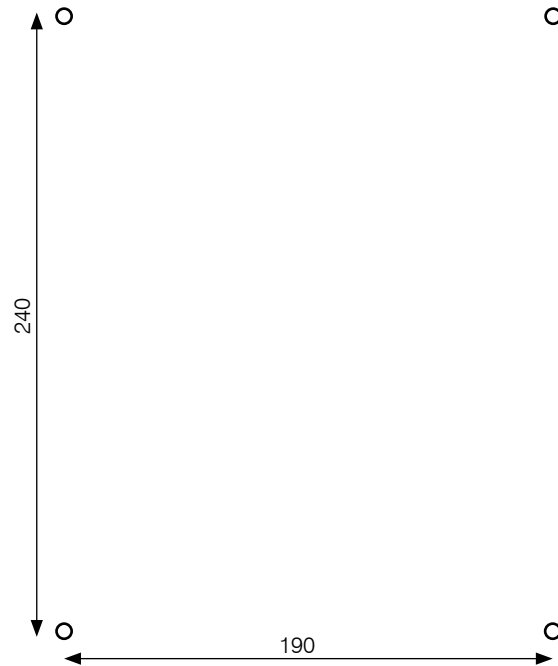

(Alle Angaben in mm)

■ BEDIENUNG

Öffnen

Entriegeln Sie den Halter durch Ziehen der Riegelachse und Anheben des Verschlusses.

Der Riegel rastet in der oberen Position ein. Das Gerät kann entnommen werden.



Schließen

Nachdem Sie den Defibrillator in der Halterung platziert haben, lösen Sie die Verriegelung und drücken den Verschluss nach unten bis die Verriegelung hörbar in der unteren Position einrastet.

Der Defibrillator ist nun gesichert.

■ REINIGUNG | DESINFEKTION

Bitte entnehmen Sie den ZOLL AED Pro® zur Reinigung aus der Halterung.

Das Bracket AED Pro kann mit einem feuchten, fusselfreien Tuch und handelsüblichen, milden Kunststoffreinigern gereinigt werden. Bitte vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass das Reinigungsmittel keine Lösemittel enthält.

Verwenden Sie zum Desinfizieren ebenfalls handelsübliches Desinfektionsmittel.

■ VERWENDETE SYMBOLE



Siehe Gebrauchsanweisung/Sicherheitshinweise beachten



Referenznummer



Chargennummer



Hersteller

■ ENTSORGUNG

Verpackungen sind Rohstoffe und daher wiederverwertbar. Entsorgen Sie diese im Interesse des Umweltschutzes sortenrein.

Weitere Informationen zur umweltfreundlichen Entsorgung erhalten Sie vom Hersteller.

■ SERVICE | HERSTELLER

CRS medical GmbH
Loherstraße 6
D - 35614 Asslar

T: +49 6441 38331-0
F: +49 6441 38331-29
info@crs-medical.com
www.crs-medical.com

■ WELCOME | SAFETY INSTRUCTIONS

Welcome

Thank you for purchasing the Bracket AED Pro.

In this user manual you will find technical information, instructions for use, and mounting directions.

Safety Instructions

- Read and understand the instructions before installing or operating the Bracket AED Pro.
- Follow all safety instructions and save this user manual in a safe place for future use.
- The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper operation, mounting, or assembly.
- Repair and maintenance of the Bracket AED Pro can only be performed by authorized personnel. Please consult directly to CRS medical GmbH Technical Support if the device is defective or damaged. Any changes to the device or its accessories which are not performed by CRS medical GmbH will void all product warranties. CRS medical GmbH will not be liable for unauthorized repair or maintenance.
- Check the Bracket AED Pro and do not use if:
 - there is visible mechanical damage on the locking mechanism
 - there is visible mechanical damage on the holder

■ APPLICATION

The Bracket AED Pro is intended to be installed in ambulances which use the ZOLL AED Pro® defibrillator in combination with the softbag listed under accessories. Using a different protective bag is not allowed.

The holder may only be used in a protected environment. These include massive walls in the interior of buildings and stable walls of EMS ground vehicles.

Please also follow all manufacturer's instructions for the defibrillator.

■ SCOPE OF DELIVERY

1 Bracket AED Pro (P/N: 1042100001)

1 User Manual

■ TECHNICAL DATA

Weight	2300 g
Dimensions (HxWxD)	255x335x130 mm
Operating temperature	0°C to +40°C, 5% to 95% HR, non-condensing
Storage temperature	-30°C to +70°C, 5% to 95% HR, non-condensing

Subject to change without notice.

■ ACCESSORIES

The following accessories are not included in the scope of delivery.


Softbag AED Pro (P/N: 1042101009)



AED Pro® with Softbag AED Pro

■ INSTALLATION

Mount the Bracket AED Pro with 4 screws size M6 according to the drilling diagram below.

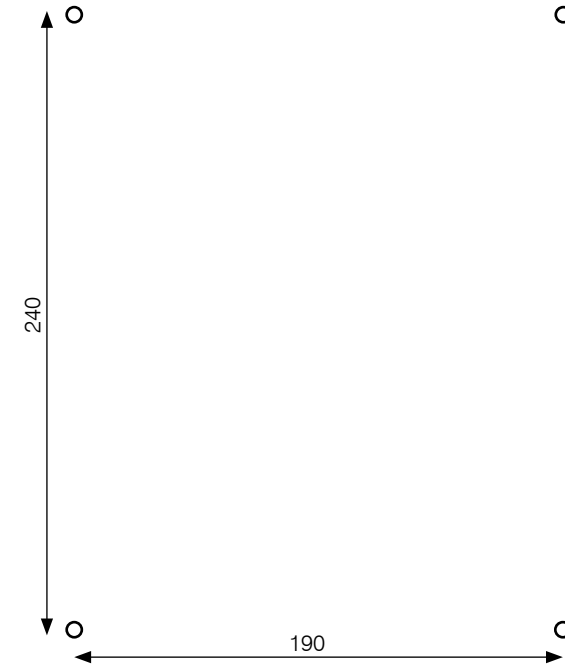

(All dimensions are in mm)

■ OPERATION

Open

Unlock the bracket by pulling the locking bolt and lifting the locking device.

The locking device rests in the upper position so the device can be removed.



Close

Insert the defibrillator and pull the locking bolt to unlock the locking device from the upper position. Press the locking device down until the locking bolt engages hearable in the lower position.

The defibrillator is now secured.

■ CLEANING | DISINFECTION

Please remove the ZOLL AED Pro® out of the bracket before cleaning. The Bracket AED Pro can be cleaned with a damp, lint-free cloth and commercially available mild plastic cleaners. Please ensure, that the cleaner does not contain any solvents. Commercially available disinfectants can be used for disinfection

■ SYMBOLS



See user manual/note safety instructions



Reference



Lot number



Manufacturer

■ DISPOSAL

Packing is raw material and therefore recyclable. On behalf of environment protection please dispose the packing sorted. Dispose and recycle all packaging according to your local laws and regulations.

For more detailed information regarding environmentally friendly waste disposal please contact the manufacturer.

■ SERVICE | MANUFACTURER

CRS medical GmbH
Loherstraße 6
D - 35614 Asslar

T: +49 6441 38331-0
F: +49 6441 38331-29
info@crs-medical.com
www.crs-medical.com

□ Loherstraße 6
□ D - 35614 Asslar

□ T: +49 6441 38331-0
□ F: +49 6441 38331-29

□ info@crs-medical.com
□ www.crs-medical.com

